

## Leggerezza e Flessibilità in un unico dispositivo


### LEGGEREZZA

Con soli 14 grammi di peso, FIXUS22 è uno dei fissatori per falangi più leggero esistenti attualmente sul mercato. Oltre ad essere caratterizzato da un movimento 3D, comune a tutti i fissatori Fixus, FIXUS22 è leggero, duraturo e flessibile. Grazie al suo design FIXUS22 può essere utilizzato con fratture molto piccole; il fissatore può avere una lunghezza minima di 3.2 cm.

Una delle caratteristiche che rende unico FIXUS22 è il **Flessore Dinamico**.

L'immagine a sinistra mostra il dispositivo di flessione dinamica, nella sua configurazione aperta. Per minimizzare gli stress, la lunghezza totale non deve variare, indipendentemente dallo stato (aperto o chiuso).

Il dispositivo è regolabile e consente un controllo continuo del movimento poliassiale delle dita, dalla configurazione rigida fino ad un range di 30 gradi, in qualsiasi direzione.

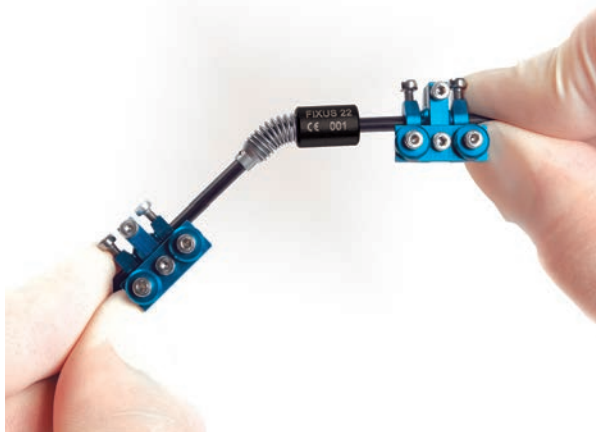


## FLESSIBILITA'

Fixus offre FIXUS22 in tre configurazioni diverse: Fissatore Rigido, Fissatore Dinamico e Fissatore con Unità di Compressione/Distrazione.

FIXUS22 è stato progettato per rispondere alle crescenti esigenze di lesioni dei piccoli frammenti, garantendo facilità d'uso, versatilità e comfort per il paziente.


La dimensione complessiva del fissatore lo rende uno dei dispositivi più compatti e leggeri offerti oggi. La barra in carbonio a basso profilo, 3 mm, e la base morsetto a sfera assemblata in alluminio, sono perfetti per il comfort del paziente, pur mantenendo il fissatore resistente e durevole.

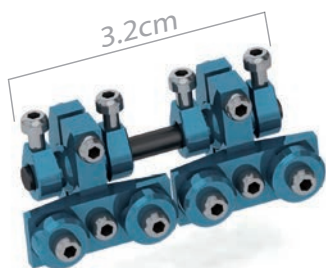

Montaggio chiuso per piccoli frammenti

## CARATTERISTICHE & VANTAGGI

- La dimensione complessiva del fissatore lo rende uno dei dispositivi più compatti e leggeri offerti oggi
- Le componenti modulari del sistema consentono un posizionamento indipendente delle fiches
- Dispositivo unico di flessione dinamica per evitare la rigidità articolare delle dita
- Le basi morsetto a sfera possono essere posizionate in diverse direzioni, consentendo un posizionamento ottimale delle fiches
- Gli adattatori a rondella per fiche singola, consentono di posizionare le fiches in direzione parallela, convergente o divergente
- Barra in fibra di carbonio radiotrasparente che consente la visualizzazione completa della frattura
- Componenti leggere e a basso profilo (14 g)
- Fiches da 1,2 mm a 2,0 mm

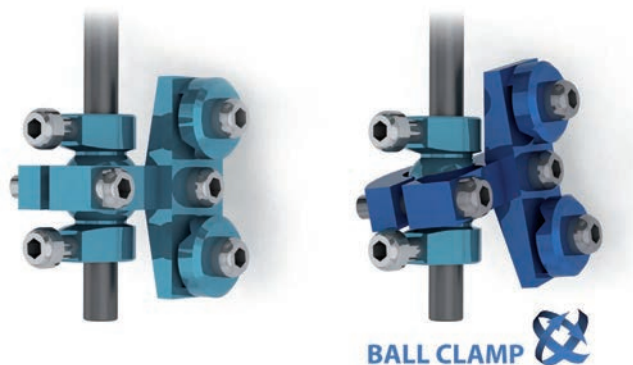


Movimento 3D di ogni singolo morsetto

## ACCOPIAMENTO DINAMICO

Il fissatore flessibile FIXUS22 è l'unico ad avere il Flessore Dinamico.

Il dispositivo è regolabile e consente un controllo continuo del movimento poliassiale delle dita fino ad un range di 30 gradi, in qualsiasi direzione.

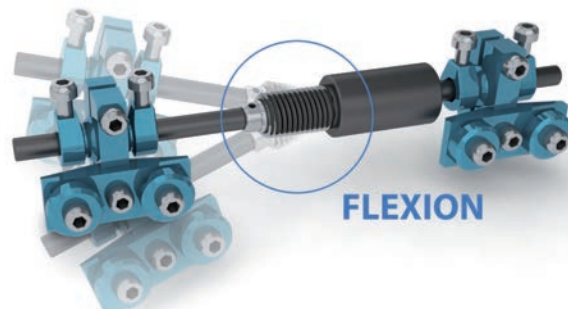

Movimento Flessibile in ogni direzione

## PRODOTTI

Descrizione	Codice
Fissatore Esterno <b>Dinamico</b> per Falangi ASSEMBLATO	FIX22100A
Fissatore Esterno <b>Rigido</b> per Falangi ASSEMBLATO	FIX22100B
Fissatore Esterno con <b>Unità di C/D</b> per Falangi ASSEMBLATO	FIX22100C

