



Progettato per la massima versatilità in Trauma



MODULARITA'

FIXUS66 è stato appositamente progettato per applicazioni su ossa lunghe con un periodo di trattamento di durata medio - breve. Il sistema flessibile universale Fixus consente una grande flessibilità nel posizionamento ed un'elevata stabilità.

Il nucleo del fissatore FIXUS66 è una barra in carbonio radiotrasparente con sezione ellittica, appositamente sviluppata per una maggiore stabilità, rigidità ed un'eccellente visualizzazione della frattura.


Inoltre le componenti modulari rendono FIXUS66 un fissatore stabile e facile da usare.

Il fissatore FIXUS66 prevede la filosofia progettuale di Fixus nel montaggio Bi-planare delle fiches per una maggiore stabilità, senza l'aggiunta di accessori aggiuntivi, rendendolo un fissatore versatile e stabile.

VERSATILITA'

FIXUS66 ha numerose caratteristiche affinché il chirurgo possa avere la massima flessibilità durante il posizionamento, garantendo allo stesso tempo la stabilità durante il trattamento.


Durante le procedure chirurgiche è importante che le fiches possano essere posizionate in maniera indipendente, per questo motivo FIXUS66 fornisce la possibilità di posizionare liberamente le fiches attorno al sito di frattura.

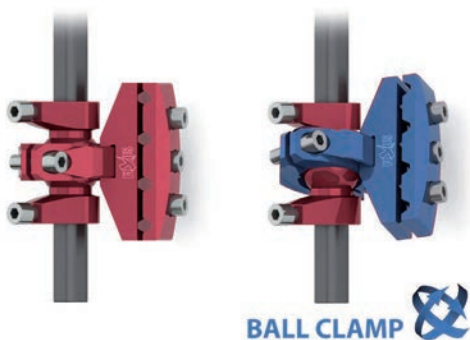

Movimento 3D completo per un posizionamento ottimale delle fiches

CARATTERISTICHE & VANTAGGI

- Progettato per un posizionamento indipendente delle fiches nelle fratture prossimali e distali
- Le basi morsetto a sfera possono essere posizionate in diverse direzioni, consentendo un posizionamento ottimale delle fiches.
- Molteplici basi-morsetto possono essere collocate sulla barra
- Il Fissatore consente un posizionamento multiplanare delle fiches
- Gli adattatori a rondella per fiche singola, consentono di disporre le fiches in direzione parallela, convergente o divergente
- Barra in fibra di carbonio radiotrasparente che consente la visualizzazione completa della frattura
- Struttura di facile adattabilità
- Progettata con un sistema JUST-ADD, che consente di aggiungere le componenti in qualsiasi momento
- Compatibile con il sistema FIXUS66 Ibrido e per Gomito.
- Fiches da 3.0 mm a 6.0 mm

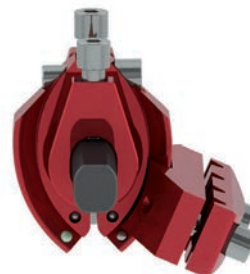

Possibilità montaggio Mono-planare

FIXUS66 è un sistema modulare che fornisce al chirurgo la possibilità di combinare le componenti e creare una struttura specifica per il paziente mediante elementi semplici.

Combinando le componenti modulari del fissatore FIXUS66 è possibile realizzare le seguenti configurazioni: Mono-planare, Bi-planare, Movimento 3D completo, Inclinazione e assemblaggi multipli.



Montaggio Bi-planare con inclinazione

PRODOTTI

Descrizione	Codice
Fissatore Esterno MONOPLANARE ASSEMBLATO	FIX66100A FIX66101A
Fissatore Esterno BIPLANARE ASSEMBLATO	FIX66200A FIX66201A
Unità di Compressione/Distrazione	FIX66200F

