

## Progettato per la massima Precisione e Stabilità



### FLESSIBILITA'

Il Fissatore per Gomito FIXUS66 ELBOW è un'estensione della linea FIXUS66 e consente il trattamento della rigidità post traumatica del gomito, della stabilizzazione a seguito di un impianto chirurgico di gomito, così come traumi acuti di gomito.



FIXUS66 ELBOW si basa sui vantaggi del sistema FIXUS66 con la sua leggerezza, versatilità e facilità di utilizzo. Come tutti i Sistemi di Fissazione Esterna Fixus, FIXUS66 ELBOW può essere usato sia con configurazione MONO-LATERALE sia BI-LATERALE.

L'apposita **Cerniera** del Fissatore FIXUS66 ELBOW è stata progettata per assorbire tutte le forze durante la flessione e l'estensione, assicurando allo stesso tempo un sistema stabile intorno ai lati delle fiches e mantenendo un asse stabile.

## PRECISIONE

Il Fissatore FIXUS66 ELBOW ha un unico metodo di targeting dell'asse articolare anatomico nell'epifisi distale omerale. Mentre i sistemi convenzionali si basano su un unico dispositivo di targeting, Fixus ha progettato un dispositivo di **Doppio Targeting** per un posizionamento migliore.

Questo consente un posizionamento più rapido e una minor regolazione nel trovare il giusto asse per il raggiungimento di un movimento rotazionale regolare.

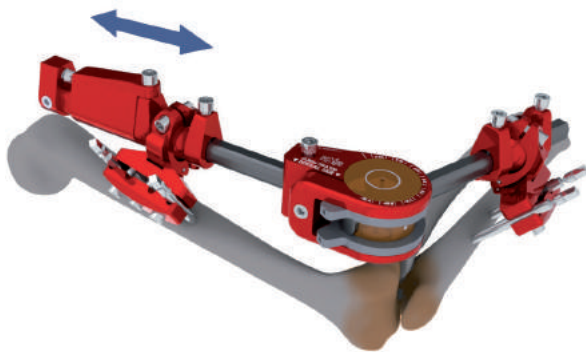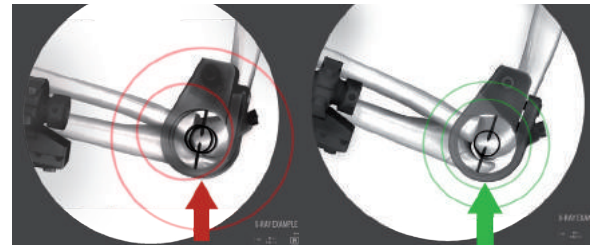

## MOVIMENTO CONTROLLATO


Con FIX66ELBOW è possibile limitare completamente il movimento, o in fase di riabilitazione consentire al paziente un range limitato di movimento.

## CARATTERISTICHE & VANTAGGI

- Sistema stabile, versatile e facile da usare
- **Doppio Targeting** (Radiotrasparente) per cercare l'asse articolare anatomico
- Consente una Distrazione controllata dell'articolazione
- Ampio range di movimento per posizionare le fiches in vari modi, al fine di evitare danni ai nervi
- Consente un movimento rotazionale controllato da -90° a 125° (totali 215°)
- Fiches da 3.0 mm a 6.00 mm

## COMPRESSIONE/DISTRAZIONE

E' possibile aggiungere una o più Unità C/D per consentire al fissatore di gomito di effettuare compressione o distrazione articolare. La Distrazione o la Compressione possono essere eseguite sul lato prossimale o distale, singolarmente o in combinazione.

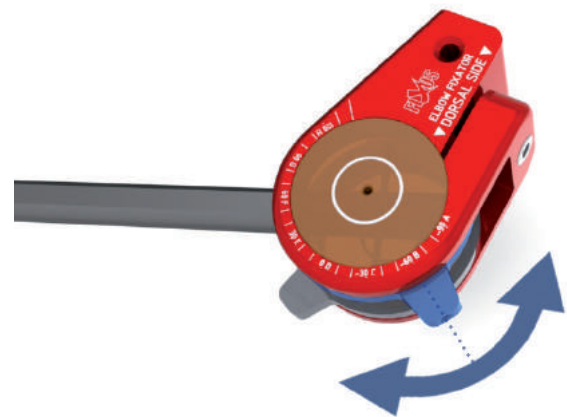

## PRODUCTS

Description	Art. code
FIXUS66 ELBOW ASSEMBLY	FIX66500A
FIXUS66 ELBOW UNIT	FIX66300M
FIXUS66 DELTA CD	FIX66300O
FIXUS66 CD DEVICE	FIX66200F

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA:

UNIMEDICAL BIO. TECH. SRL  
C.so Galileo Ferraris, 86  
10129 Torino  
info@unimedical.it - www.unimedical.it  
tel: 011 31 61 300  
fax: 011 31 61 339

