


## FIXUS88 RICOSTRUZIONE



## Progettato per la massima Stabilità e Versatilità

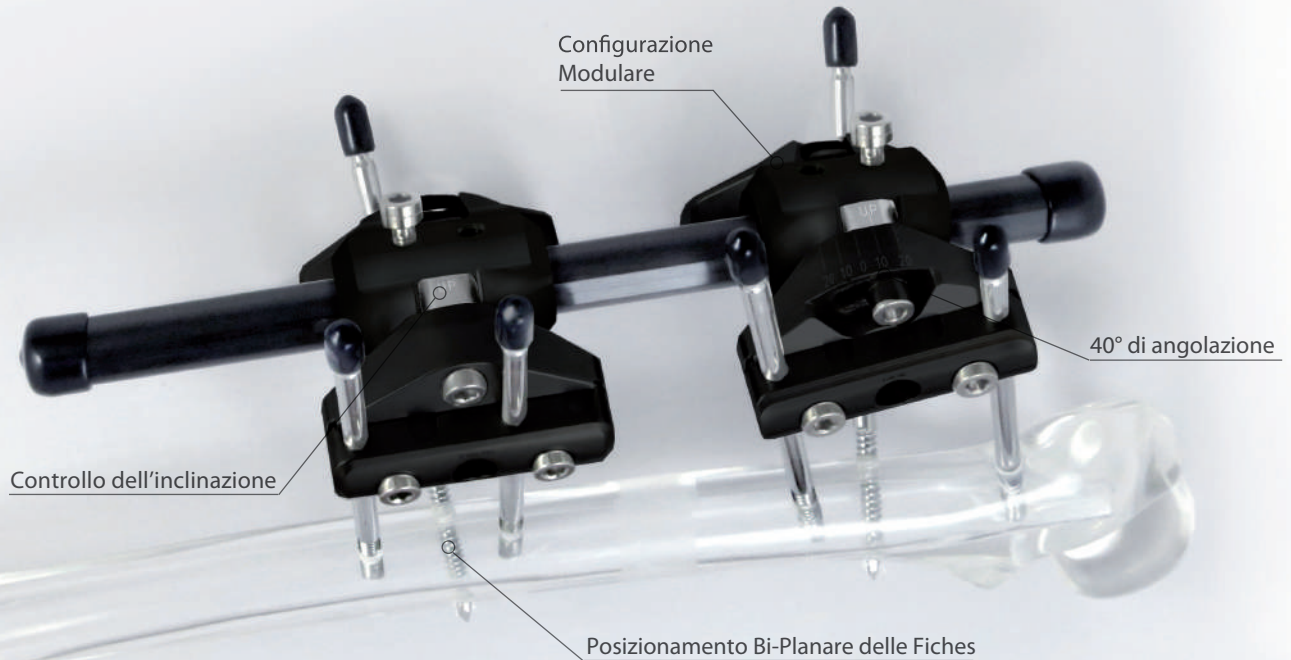

### STABILE

Il Fissatore per la Ricostruzione FIXUS88 è stato progettato per i trattamenti ricostruttivi delle ossa lunghe. Il prodotto è stato realizzato per un uso versatile e mantiene i vantaggi elementari conosciuti in tutti i prodotti Fixus.

La combinazione tra la ben nota configurazione a V delle fiches e i materiali e le finiture utilizzate, garantiscono un fissatore per la ricostruzione rigido, leggero e duraturo.

### VERSATILE

Il nuovo design assicura all'utilizzatore la stessa facilità di utilizzo, la stessa funzionalità JUST-ADD comune in tutti i Sistemi di Fissazione Esterna Fixus, con una maggiore stabilità per un utilizzo a lungo termine.

Assicura un'estrema versatilità per ogni tipo di procedura.

## MODULARITA'


Il Fissatore per la Ricostruzione FIXUS88 consiste in quattro componenti basi semplici da utilizzare. Combinando le quattro componenti è possibile ottenere il movimento indipendentemente in tutte e tre le dimensioni.

### Adattatore Barra-Morsetto: FIX88R900

- Posizionamento totalmente indipendente sulla barra in carbonio
- Accoglie contemporaneamente una o due Base Morsetto

### Base Morsetto: FIX88R902

- E' possibile posizionare fino a 4 fiches
- Controllo dell'inclinazione standard per raggiungere la curvatura dell'osso

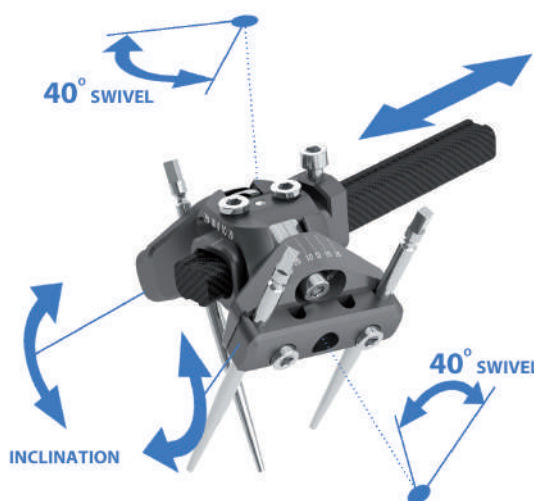

**Esempio:** Adattatore Barra-Morsetto Rotante con due Base-Morsetto Rotanti e con disposizione a V delle fiches



Configurazione Standard: Adattatore Barra-Morsetto con una (o due) Base-Morsetto

### Adattatore Barra-Morsetto Rotante: FIX88R901

- Posizionamento totalmente indipendente sulla barra in carbonio
- Accoglie una o due Base Morsetto
- 40 Gradi di Rotazione consentiti

### Base Morsetto Rotante: FIX88R903

- E' possibile posizionare fino a 4 fiches
- Controllo dell'inclinazione standard per raggiungere la curvatura dell'osso
- 40 Gradi di Rotazione consentiti

## CARATTERISTICHE & VANTAGGI

- Elementi modulari che consentono un posizionamento indipendente delle fiches
- Elevata Stabilità in molteplici piani
- Design Uni-Laterale con capacità Bi-Planare
- Controllo standard dell'inclinazione per raggiungere la curvatura dell'osso
- Distrazione Infinita
- Barra in fibra di carbonio radiotrasparente che consente la completa visualizzazione della frattura

## PRODOTTI

Descrizione	Codice
Fissatore Esterno per Ricostruzione ASSEMBLAGGIO <b>MONOFOCALE</b>	FIX88R104
Fissatore Esterno per Ricostruzione ASSEMBLAGGIO <b>BIFOCALE</b>	FIX88R105
Fissatore Esterno per Ricostruzione ASSEMBLAGGIO <b>TRIFOCALE</b>	FIX88R106
Unità di Compressione/Distrazione	FIX88R930
Adattatore Barra-Unità C/D	FIX88R911

